



Blutschlauchsysteme & Substitutionssysteme

Vielseitig einsetzbar

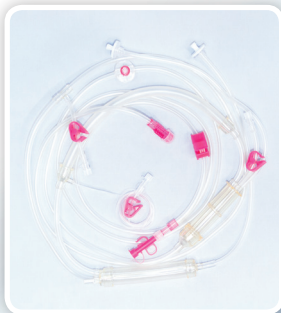


AV-06 Serie

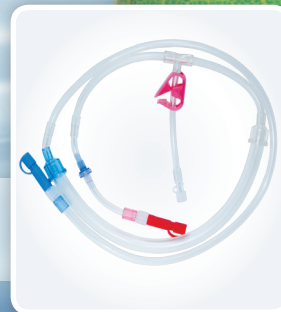


Online HDF Line
C07J-P



AV-03 Serie

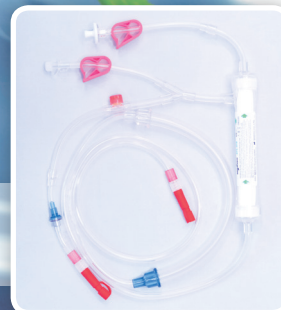

Online HDF Set
EFL-015

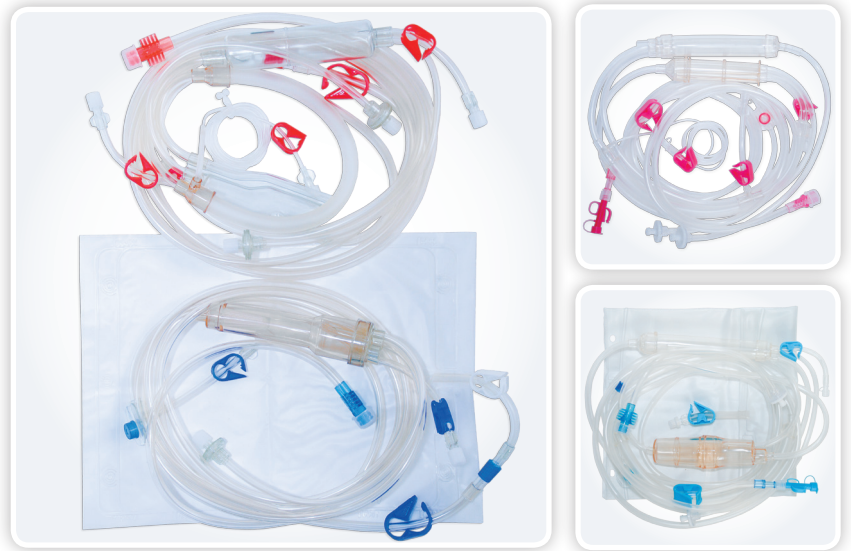

NIKKISO Blutschlauchsysteme komfortabel & sicher

Für NIKKISO Systeme


NIKKISO Blutschlauchsysteme

Die Blutschlauchsysteme der AV-03 und AV-06 Serien sind speziell für den Einsatz an NIKKISO Dialysesystemen (DBB-05, DBB-06 und DBB-07) entwickelt worden.

Durch die universellen Anschlussmöglichkeiten (Post- und Prädilution) wird nur ein Blutschlauchsystem für Hämodialyse, Hämo-filtration und Hämodiafiltration benötigt. Da-durch wird Ihre Lagerhaltung vereinfacht.




Blutschlauchsysteme				
Modell	Füllvolumen Blut (ml)	Therapie-verfahren	Sterilisations-verfahren	Geeignet für
AV-03 Serie				
AV-03-B	198	HD, HF, HDF (Post/Prä) Doppelnadel-Dialyse	Gamma	DBB-05 DBB-06 DBB-07
AV-03-SN-B	282	Single-Needle-Dialyse		DBB-05 DBB-07
AV-06 Serie				
AV-06JA-P mit prä-art. Tropfkammer	176	HD, HF, HDF (Post/Prä) Doppelnadel-Dialyse	Dampf-sterilisation (Autoklav)	DBB-05 DBB-06 DBB-07
AV-06JC-P ohne prä-art. Tropfkammer	165			DBB-05* DBB-06 DBB-07
AV-06JH-P** mit prä-art. Tropfkammer, integrierter Kochsalzleitung und Anstechdorn	174			DBB-05 DBB-06 DBB-07
AV-06JA-SN-P	230	Single-Needle-Dialyse		DBB-05 DBB-07
Substitutionssysteme				
EFL-015		Online HDF Set	ETO	DBB-05
C07J-P		Online HDF Line	Dampf-sterilisation (Autoklav)	DBB-07

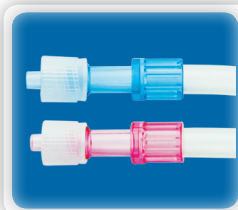

Ergonomisch geriffelte Patienten-Luer Lock Konnektoren mit Sicherungsring und Auswurfmechanismus



Leicht zu handhabende Dialysator-konnektoren

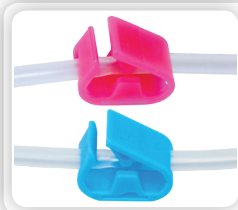


Leicht handhabbare farblich kodierte Klemmen für Arterie und Vene



Große offene Druckaufnehmerschutzfilter mit Inspektionsfenster



Heparinleitung mit ergonomischer Klemme und gesicherter Kappe

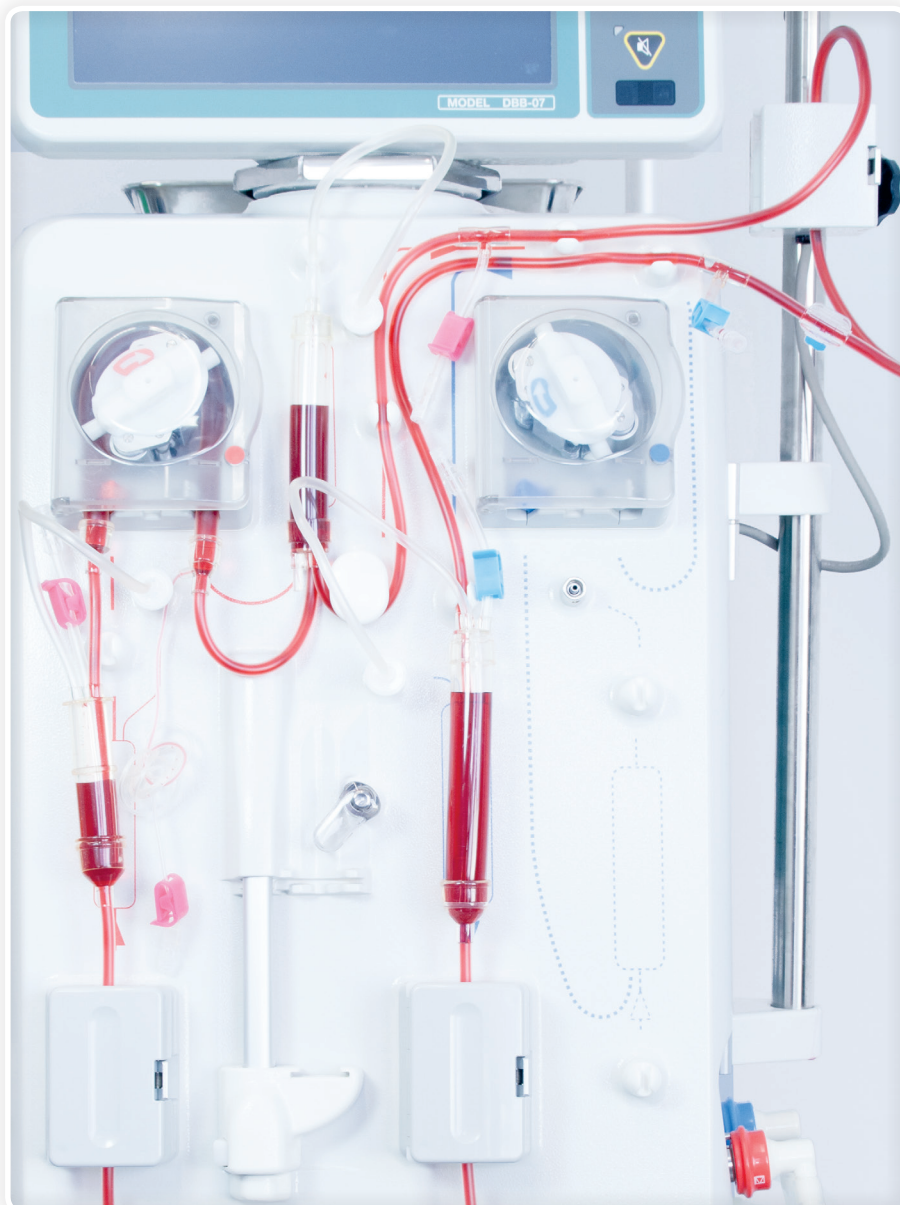

DBB-07 mit Haemo-Master und Blutschlachsystem AV-06JA-P

AV-03 Serie

Die Blutschlachsysteme der AV-03 Serie sind für alle gängigen Therapieverfahren verwendbar.

AV-06 Serie

Die umweltfreundlich im Autoklav dampfsterilisierten Blutschlachsysteme der AV-06 Serie sind von NIKKISO entwickelt worden. Die Komponenten und Tropfkammern sind für ein kleines Füllvolumen und geringen Blut-/Luftkontakt ausgelegt.

Die offenen Druckableitfilter und die passgenauen Schlauchlängen erleichtern das Aufrüsten.

Das Doppelnadel-Blutschlachsystem **AV-06JA-P** ist mit einer arteriellen Tropfkammer vor der Blutpumpe ausgestattet. Darüber hinaus hat es offene Druckableitfilter, sowie zwei Ablaufhaken.

Das Doppelnadel-Blutschlachsystem **AV-06JC-P** hat keine arterielle Tropfkammer vor der Blutpumpe.

Das Doppelnadel-Blutschlachsystem **AV-06JH-P** ist mit einer integrierten Kochsalzleitung und Anstechdorn ausgestattet.

Das Single-Needle-Blutschlachsystem **AV-06JA-SN-P** ermöglicht ein hohes Phasenvolumen und minimiert den Rezirkulationsanteil.



Therapieverfahren

HD, HF, HDF (prä / post) Doppelnadel-Dialyse, Single-needle-Dialyse

Sterilisationsverfahren


Dampfsterilisation (EN ISO 17665-1:2006)

<i>Mindesthaltbarkeit</i>	36	Monate
<i>Verpackungseinheiten</i>	24	Stück/Karton
	528	Stück/Palette
<i>AV-06JA-SN-P</i>	18	Stück/Karton
	396	Stück/Palette


Substitutionssystem C07J-P für DBB-07

Die integrierte Doppelfiltration mit zwei EF-02D Dialysierflüssigkeitsfiltern gewährleistet die höchste Dialysierflüssigkeitsqualität für alle Behandlungsarten. Dies schützt die Patienten vor Bakterien, Endotoxinen und deren Fragmente.

Die kosteneffektive Lösung zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten.

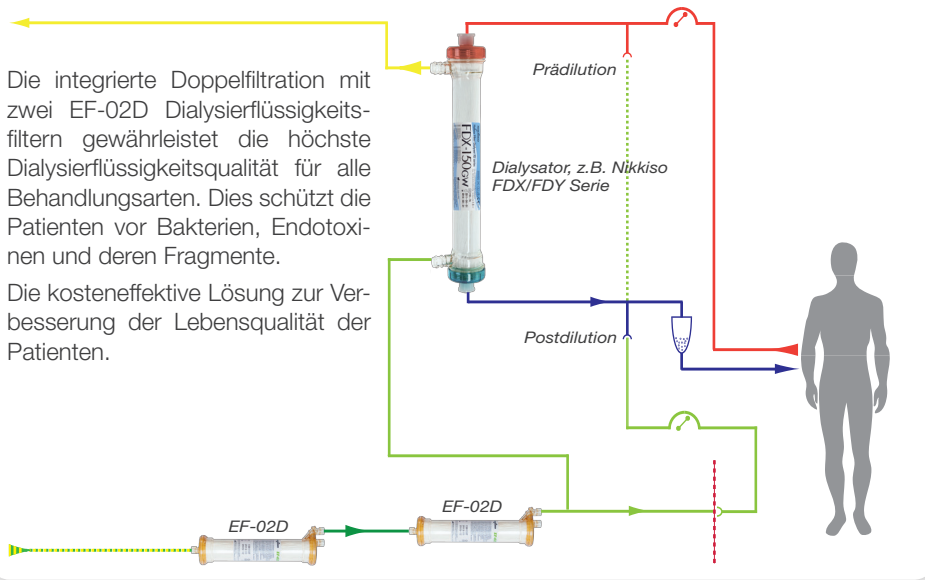

Kostengünstige doppelte Filterstufe (Kaskade)

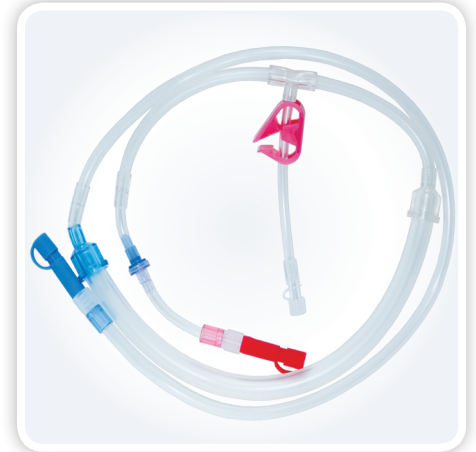


Dampfsterilisiertes Substitutionssystem C07J-P

Substitutionssystem EFL-015 - Der Sicherheitsstandard für die Online Hämodiafiltration

Durch die Integration eines sterilen Einwegfilters als letzte Barriere für Bakterien, Endotoxine und deren Fragmente bietet das Substitutionssystem EFL-015 die Möglichkeit Online Behandlungen durchzuführen.

Die geforderte Doppelfiltration wird somit durch den Einsatz eines „Einmalfilters“ als letzte Reinigungsstufe gewährleistet.

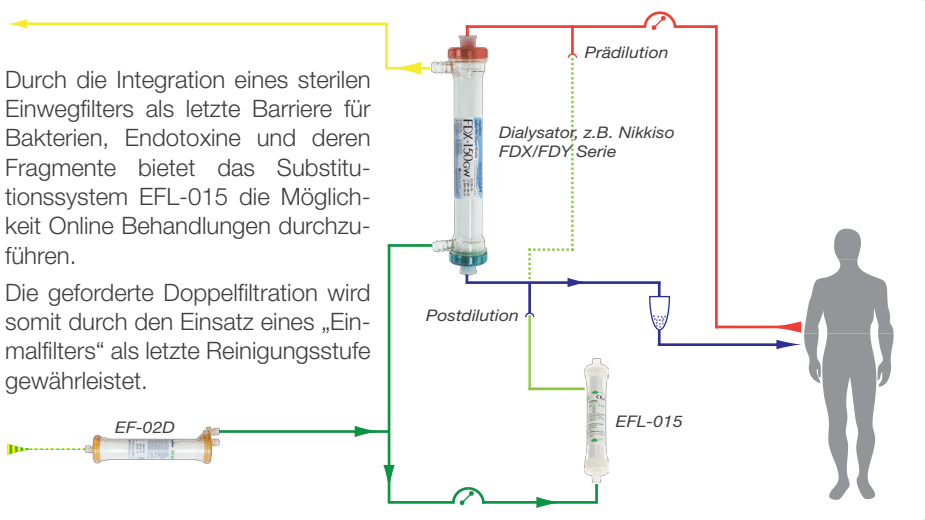

Patientenschutzsystem im Online HDF Modus (DBB-05)



Substitutionssystem mit Einwegfilter EFL-015

www.nikkiso-europe.eu



Typ

AV-03 Serie



AV-06 Serie
EFL-015
C07J-P



Hersteller

Serumwerk Bernburg Vertriebs GmbH
Hallesche Landstr. 105b
D-06406 Bernburg
Telefon: +49 3471 860-0
Telefax: +49 3471 860-123
E-Mail: info@serumwerk.de
Internet: www.serumwerk.de

EU-Bevollmächtigter

NIKKISO CO., LTD.
20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku
Tokyo 150-6022, Japan
Telefon: +81-3-3443-3727
Fax: +81-3-3440-0681
Internet: www.nikkiso.com

NIKKISO Europe GmbH
Desbrocksriede 1
D-30855 Langenhagen
Telefon: +49 511 679999 - 0
Fax: +49 511 679999 - 11
E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu

Exklusivvertrieb durch

NIKKISO Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg
Telefon: +49 40 414629 - 0
Fax: +49 40 414629 - 49
E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Website: www.nikkiso-europe.eu

NIKKISO Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg
Telefon: +49 40 414629 - 0
Fax: +49 40 414629 - 49
E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu